


PIEZON® PS

JEDNA KOŃCÓWKA DLA 95% PRZYPADKÓW
SZWAJCARSKI MAJSTERSZTYK



POWIĘKSZENIE 20X

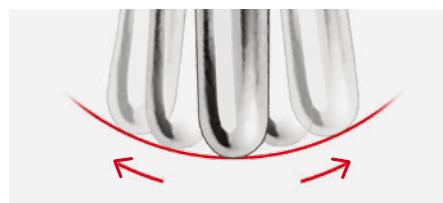

RUCH 2 MILIMETROWEGO
WIERZCHOŁKA KOŃCÓWKI PS

EMS 
MAKE ME SMILE.

JEDNA JEDYNA KOŃCÓWKA I SKALING STAJE SIĘ ŁATWY

KOŃCÓWKA PIEZON® PS NO PAIN DZIAŁA PERFEKCYJNIE W 95% WSZYSTKICH PRZYPADKÓW.

► Skaling nad- i poddziąsłowy oraz oczyszczanie periodontologiczne – te wszystkie zabiegi wykonasz przy pomocy końcówki EMS Perio Slim, która jest KLUCZOWA w skutecznej profilaktyce stomatologicznej, która zorientowana jest na utrzymanie jamy ustnej w zdrowiu.

Podczas gdy inni sugerują wykorzystanie kilku różnych instrumentów do pełnego oczyszczenia jamy ustnej, EMS opracował oryginalną końcówkę PIEZON® PS NO PAIN. Kończówka


PS to wszystko co jest potrzebne do skutecznego skalingu!

Zaprojektowana tak, aby była smukła i gładka jak sonda periodontologiczna, oryginalna końcówka PIEZON® PS NO PAIN, jest przyjazna dla dziąseł, minimalnie inwazyjna, maksymalnie zapobiegawcza i chroni nabłonek dzięki idealnie liniowym ruchom. Aby zapewnić zabieg bez bólu – NO PAIN, użyj początkowych 1-2 milimetrów licząc od wierzchołka końcówki.

Sonda
periodontologiczna



Kończówka PS

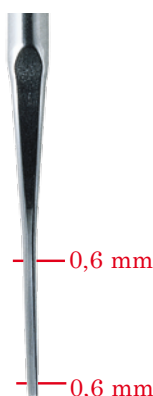



Kończówka PS



Twoja praca kliniczna staje się dużo łatwiejsza dzięki użyciu tylko jednej końcówki. Nasze specjalnie opracowane narzędzie szkoleniowe do nauki skutecznego i komfortowego skalingu pomoże Ci stać się prawdziwym mistrzem w pracy końcówką PIEZON® PS.

Również kursy Swiss Dental Academy pomogą Ci rozwinąć umiejętności.

Kończówka PIEZON® PS NO PAIN może być używana nad- i poddziąsłowo, we wszystkich kwadrantach, do 10 mm. Gwarantowana stała skuteczność przez cały okres użytkowania: +1000 zabiegów skalingu. Skuteczność czyszczenia i wyjątkowy komfort dla pacjentów zostały udowodnione naukowo.

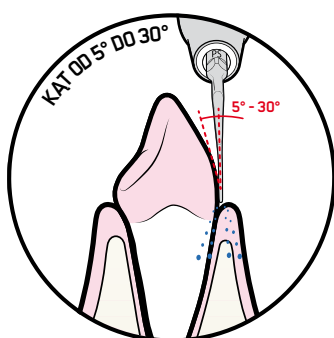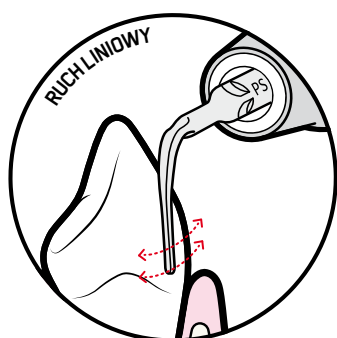

UZYSKAJ DOSTĘP DO WYNIKÓW
KLINICZYCH DOTYCZĄCYCH
KOŃCÓWKI PIEZON® PS



PERFEKCYJNE SZWAJCARSKIE ZESTROJENIE

REZULTATEM JEST BRAK BÓLU – NO PAIN

► Oryginalny system PIEZON® NO PAIN składa się z 3 elementów: końcówki PIEZON® PS NO PAIN, zaawansowanej technologicznie rękojeści PIEZON® i nowoczesnego modułu elektronicznego NO PAIN.




► Technologia systemu PIEZON® została pierwotnie wynaleziona w Szwajcarii w 1981 roku przez Pierre'a Mabile, współzałożyciela EMS i byłego właściciela francuskiej firmy Satelec. Technologia została przeprojektowana przy użyciu całej wiedzy technicznej z Valley-de-Joux i we współpracy z Jaeger-LeCoultre (słynnym zegarmistrzem), a także jego wyłącznymi dostawcami.

► Od tego czasu jest stale udoskonalana, aby gwarantować najwyższy komfort i skuteczność leczenia. Wykorzystuje technologię piezoceramiczną do konwersji inteligentnego sygnału elektronicznego modułu NO PAIN na mechaniczny ruch wibracyjny. Powoduje to aktywację końcówki PIEZON® PS NO PAIN wykonującej idealnie liniowe ruchy.

► Technologia sprzężenia zwrotnego PIEZON® NO PAIN zapewnia wysoki komfort pacjenta. Rękojeść intuicyjnie rejestruje kamień, rozpoznając wyższy opór, a następnie urządzenie automatycznie zwiększa moc na końcówce, aby skutecznie usunąć kamień na danym obszarze.


► Tylko oryginalne końcówki i rękojeści EMS PIEZON® zapewniają pełne wykorzystanie możliwości technologii PIEZON®, poszanowanie anatomii zęba i zapewnienie komfortowego leczenia pacjentów.

POWIĘKSZENIE 20X

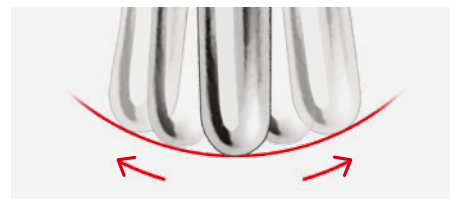

RUCH 2 MILIMETROWEGO WIERZCHOŁKA KOŃCÓWKI PS

ZOBACZ PORÓWNANIE IDEALNIE LINIOWYCH RUCHÓW KOŃCÓWKI PIEZON® Z POZOSTAŁYMI TECHNOLOGIAMI SKALERÓW.

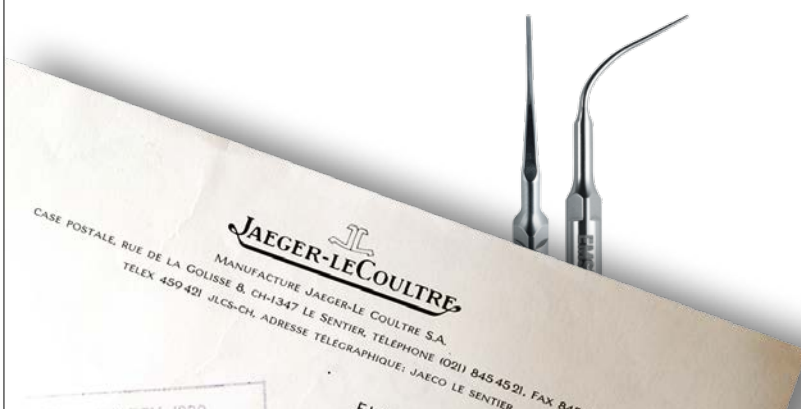

ROZWIĄZANIE DLA 95% WSZYSTKICH PRZYPADKÓW

DLA SPECJALNYCH PRZYPADKÓW TAKICH JAK BARDZO TWARDEY KAMIEŃ LUB OBSZARY PRZESTRZENI MIĘDYZĘBOWYCH, EMS OPRACOWAŁ DEDYKOWANE I SKUTECZNE KOŃCÓWKI.



► Końcówka PIEZON® P służy głównie do usuwania uporczywego, twardego naddziąsłowego i poddziąsłowego (do 4 mm) kamienia i zębów we wszystkich kwadrantach. Jest to najnowsza ewolucja końcówki PIEZON® A, która nie jest już dostępna.

► Końcówki PIEZON® PSR i PSL są zalecane do trudno dostępnych miejsc powierzchni dystalnych oraz mezjalnych i mają większą skuteczność i komfort, używane mogą być naddziąsłowo i poddziąsłowo do 8 mm. Końcówki PIEZON® PSR & PSL charakteryzują się doskonałą skutecznością w usuwaniu dużych zębów kamienia w porównaniu z końcówką PIEZON® PS NO PAIN. Oszczędzają czas, zwłaszcza podczas wstępnej terapii periodontologicznej oraz są wskazane wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

► Końcówka PIEZON® PI posiada powłokę wykonaną z zaawansowanego technologicznie polieteroeteroketonu (PEEK), który bezpiecznie czyści wrażliwe powierzchnie łączników implantów i uzupełnień. Łatwo i z chirurgiczną precyzją oczyszcza płytkę nazębną dzięki ruchom liniowym i stali nierdzewnej klasy medycznej. Jest idealna do minimalnie inwazyjnej pielęgnacji implantów i dla maksymalnego komfortu pacjenta.


NUMERY KATALOGOWE KOŃCÓWEK:

PIEZON PS INSTRUMENT	REF DS-016A
PIEZON P INSTRUMENT	REF DS-011A
PIEZON PSR + PSL INSTRUMENTS	REF FS-461
PIEZON PI INSTRUMENTS	REF DT-065A
FILE HOLDER 120°	REF DS-010A

TRZEBA ĆWICZYĆ, ABY BYĆ MISTRZEM

► Ćwicz swoje umiejętności z narzędziem szkoleniowym PIEZON® PS! Nic nie przebiję odpowiedniego treningu i stosowania zalecanych metod leczenia w celu uzyskania efektu PIEZON® NO PAIN.

► Zawsze używaj pierwszych 1-2 milimetrów wierzchołka końcówki PIEZON® PS NO PAIN, bokiem na zębie, aby zapewnić pacjentowi prawdziwie bezbolesny zabieg - NO PAIN.

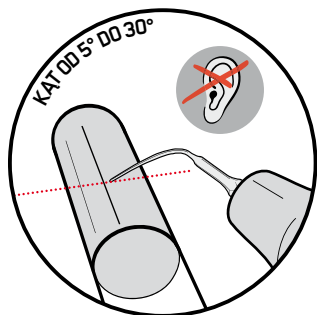

► Właściwe ustawienia urządzenia, odpowiedni kąt, odpowiedni nacisk i szybkie ruchy do przodu i do tyłu, są do wykonania rzeczywiście minimalnie inwazyjnego i komfortowego zabiegu.

► Jeśli słyhać niepokojące dźwięki, może to powodować ból!

► Jeśli nie generujesz końcówką hałasu, wszystko jest w porządku!

PRAWIDŁOWA SEKWENCJA UŻYTKOWANIA:

1. **PRAWIDŁOWE USTAWIENIA** – Ustaw urządzenie AIRFLOW® Prophylaxis Master z modułem NO PAIN: minimum 70% wody i maksimum 60% mocy.
2. **ADAPTACJA** – Trzymaj oryginalną końcówkę PIEZON® PS NO PAIN równoległe do próbki dopasowując stronę boczną.
3. **USTAWIENIE KĄTA PRACY** – Ustaw końcówkę pod niewielkim kątem (5°-30°). Tylko ostatnie 1-2 mm powinny stykać się ze sztucznym kamieniem.
4. **NACISK** – Pozwól końcówce pracować bez wysiłku, nie wywieraj nacisku.
5. **RUCH** – Wykonuj małe i delikatne ruchy w przód i w tył wzdłuż próbki. Poczuj ruch liniowy.







OBEJRZYJ WIDEO,
ABY DOWIEDZIEĆ
SIĘ JAK
OPTYMALNIE
PRACOWAĆ
Z KOŃCÓWKĄ
PIEZON® PS



OPTYMALNE USTAWIENIA NO PAIN

ZALECENIA:

- ▶ Używaj tylko bocznych stron końcówki, jednocześnie poruszając się wokół zęba.
- ▶ Używaj tylko samego końca końcówki.
- ▶ Ostanie 1-2 mm końcówki to najbardziej aktywna jej część.

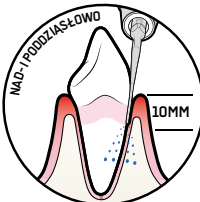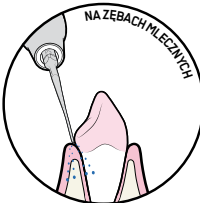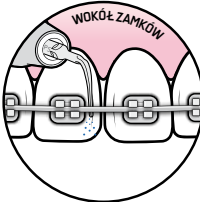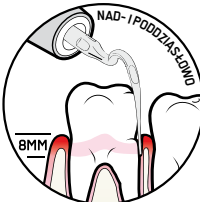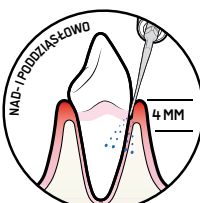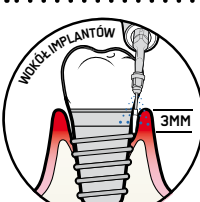Kończówka	Przypadek	Ustawienie Mocy	Ustawienie Wody	Sugestie	
	Naddziąsłowo	10% – 100%	70% do 100%	Zacznij z ustawieniem na małą moc i zwiększ, jeżeli jest potrzeba.	
	Poddziąsłowo → 10 mm	10% – 60%			
		Dzieci			10% – 60%
	Ortodoncja	10% – 60%			Nie dotykaj zamków, aby uniknąć zarysowań i osłabienia wiązania bondu.
	Nad- i poddziąsłowe powierzchnie styczne → 8 mm	10% – 60%			Uwaga: końcówka jest zakrzywiona (w prawo lub lewo) i ma więcej mocy niż PS. Zacznij na niskiej mocy i zwiększ, jeżeli jest potrzeba.
	Duży kamień naddziąsłowy i poddziąsłowy → 4 mm	10% – 60%			Zacznij na niskiej mocy i zwiększ, jeżeli jest potrzeba.
	Implanty nad- i poddziąsłowo → 3mm	10% - 60%	Zacznij na niskiej mocy i zwiększ, jeżeli jest potrzeba.		

SPRAWDŹ SWOJĄ KOŃCÓWKĘ PS




- ▶ Zawsze sprawdzaj stopień zużycia końcówki PIEZON® PS NO PAIN, aby zapewnić pacjentom maksymalny komfort podczas zabiegu.
- ▶ Jeżeli wierzchołek końcówki wykazuje zużycie większe niż 2 mm, to końcówkę należy jak najszybciej wymienić na nową, oryginalną.
- ▶ Pracując zużytą końcówką, doprowadzisz do uszkodzenia sonotrody rękojeści i trzeba będzie kupić nową rękojeść.

NOWA



JEŻELI ZUŻYTE!

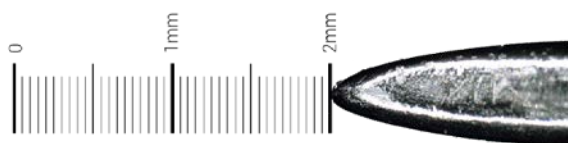

WYMIENI!



OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAJ KOŃCÓWKI PIEZON® PS JEŻELI JEJ WIERZCHOŁEK JEST KRÓTSZY O 2MM+.

UŻYWAJ TYLKO ORYGINAŁÓW

NIGDY NIE KUPUJ KOPII



„KOMPATYBILNA“ TO NIC WIĘCEJ NIŻ KOPIA!

► Tanie kopie, których producenci twierdzą, że są „kompatybilne” z systemami EMS PIEZON® obecne są na rynku już od długiego czasu. Zagrożają one Twoim pacjentom i urządzeniom!

► „Kompatybilnych” końcówek nie można porównywać z oryginalnymi końcówkami PIEZON® PS NO PAIN firmy EMS. Kopie te nie odpowiadają żadnym standardom jakości EMS i nie odpowiadają precyzji standardu EMS Micrometric Swiss Manufacturing. W rezultacie powierzchnia końcówki nie jest zbliżona do oryginalnej końcówki PIEZON® PS NO PAIN. Natomiast generują one nieregularne ruchy.

► W oryginalnej końcówce PIEZON® PS NO PAIN nic się nie obraca, nic nie oscyluje w formie

kęgów, elips, ósemek lub w inny sposób. Oznacza to również, że nic nie wykrzywia się, negatywnie oddziałując na ząb lub dziąsło. Żadna skopiowana końcówka nie może się równać do oryginalnej końcówki PIEZON® PS NO PAIN.

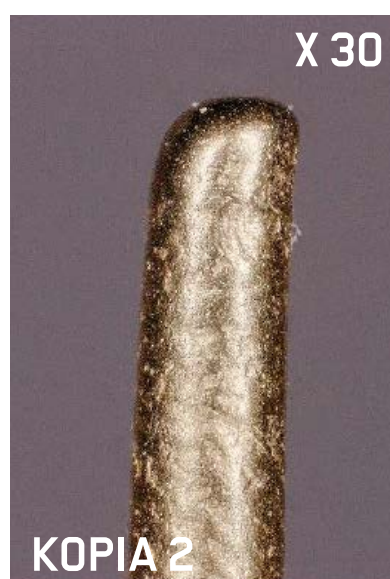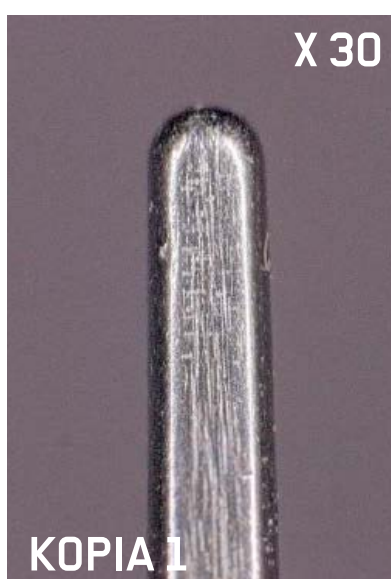


GŁADKA POWIERZCHNIA KOŃCÓWKI PS JEST KLUCZOWYM CZYNNIKIEM W TRYPTYKU PIEZON® NO PAIN. ŻADNE PODOBNE WYGLĄDAJĄCE KOŃCÓWKI NIE OFERUJĄ TAKICH SAMYCH CECH JEJ POWIERZCHNI.

TANIE KOPIE MOGĄ SPOWODOWAĆ WIELE POWAŻNYCH USZKODZEŃ

► Chronić swój sprzęt. Polegaj wyłącznie na oryginalnej końcówce PIEZON® PS NO PAIN i oryginalnych urządzeniach EMS. Z tak zwanymi „kompatybilnymi”, fałszywymi lub kopiowanymi końcówkami ryzykujesz również zniszczenie komponentów premium EMS.

Tylko oryginalne produkty EMS są zatwierdzone i zweryfikowane w pracy z urządzeniami EMS w celu zastosowania rewolucyjnej Guided Biofilm Therapy. Po co kupować bezwartościowe końcówki, jeśli jeden zabieg z wykorzystaniem oryginalnej kosztuje tylko 50 groszy?

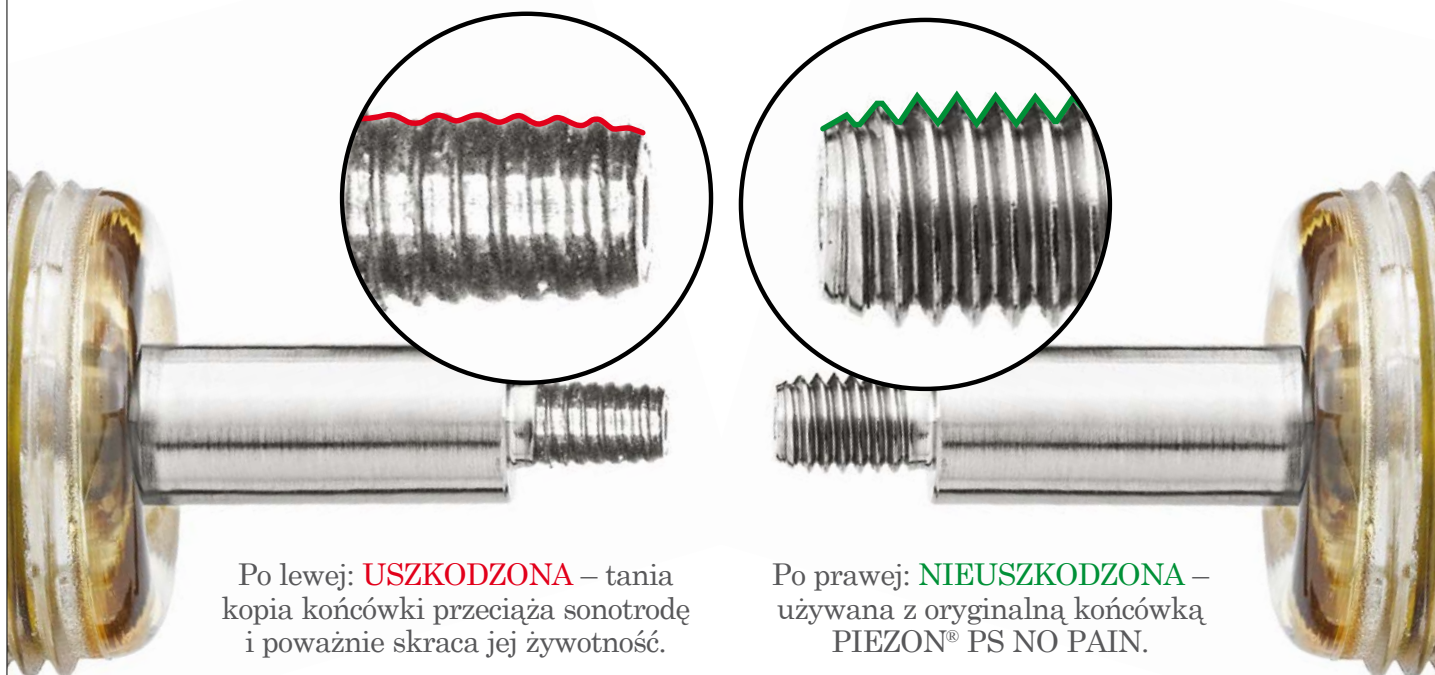

Po lewej: **USZKODZONA** – tania kopia końcówki przeciąża sonotrodę i poważnie skraca jej żywotność.

Po prawej: **NIEUSZKODZONA** – używana z oryginalną końcówką PIEZON® PS NO PAIN.

► Inwestowanie w szwajcarską jakość się opłaca: podczas gdy większość kopiowanych końcówek może wykonać tylko od 100 do 200 zabiegów skalingu, końcówka PIEZON® PS NO PAIN wytrzymuje ponad 1000 zabiegów, zmniejszając w ten sposób koszty leczenia do kilkudziesięciu groszy na pacjenta. Ile jest dla Ciebie wart Twój pacjent?

► Sonotroda oryginalnej rękocyści PIEZON® wykonana jest z najwyższej jakości tytanu. Nie dotyczy to tanich kopii, które wywierają na nią taki sam efekt jak obcinacz gwintu i uszkadzają cenną rękocyść: utrata gwarancji!

**CHROŃ ZĘBY SWOICH PACJENTÓW!
NIE PODEJMUJ RYZYKA
PRACY Z KOPIAMI LUB TZW.
„KOMPATYBILNYMI“ KOŃCÓWKAMI!**

WIELKI BŁĄD TANIEGO ZAKUPU



TANIE ZAKUPY MOGĄ OKAZAĆ SIĘ BARDZO KOSZTOWNE

Nie ma rzeczy na świecie,
której nie można trochę gorzej wykonać
i trochę taniej sprzedać,
a ludzie którzy patrzą tylko na cenę
zawsze będą ofiarami takich poczynań.
Niemądrze jest zapłacić za dużo,
ale jeszcze gorzej jest zapłacić za mało.
Jeżeli zapłaci się za dużo,
można stracić trochę pieniędzy i to wszystko.
Jednakże jeżeli się zapłaci za mało,
wtedy czasem można stracić wszystko,
ponieważ zakupiony przedmiot może nie
wypełnić przeznaczonych mu funkcji.
Reguła gospodarki nie dopuszcza, żeby
za małą cenę otrzymać dużą wartość.
Wybierając najtańszą ofertę
trzeba uwzględnić koszty ryzyka.
Gdy się to zrobi, wtedy nie ma się już
tyle pieniędzy aby kupić coś lepszego.

John Ruskin (1819-1900)





KUPUJ TYLKO ORYGINALNE!!

WELLNESS DLA PACJENTÓW UŻYWAJ TYLKO ORYGINAŁÓW!

CHROŃ SWOICH PACJENTÓW

► Aby przeprowadzić bezbolesny zabieg nie uszkodzając zęba, polegaj wyłącznie na oryginalnej końcówce PIEZON® PS NO PAIN i piasku AIRFLOW® PLUS szwajcarskiej firmy EMS. Z tak zwanymi „kompatybilnymi”, czyli fałszywymi końcówkami i piaskami lub ich kopiami, ryzykujesz zniszczenie zębów i dziąseł pacjentów.

► Tylko oryginalne produkty EMS są zatwierdzone i gwarantowane do użytku

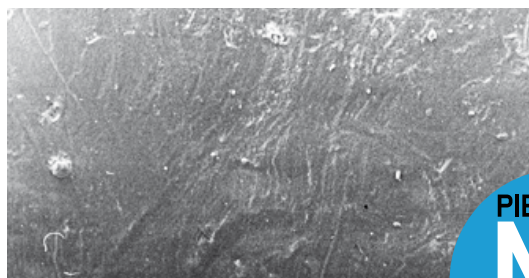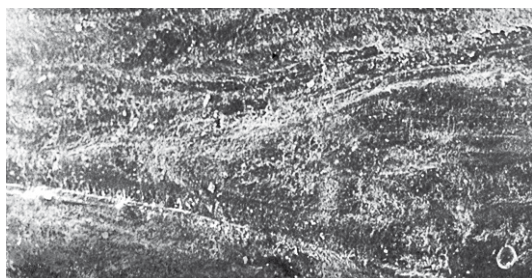

Po lewej: **CHROPOWATA** – powierzchnia zęba, na której pracowano instrumentem X
Po prawej: **GŁADKA** – powierzchnia zęba, na której pracowano oryginalną metodą PIEZON i szwajcarską końcówką EMS



AIRFLOW®: WYSTRZEGAJ SIĘ TAK ZWANYCH „KOMPATYBILNYCH” PIASKÓW

► Wielu dostawców twierdzi, że ich podobne piaski są bardziej przystępne cenowo i działają dobrze ze sprzętem lub urządzeniami EMS. W rzeczywistości jest odwrotnie. Te piaski łatwo przebijają rękojeści EMS AIRFLOW® i uszkodzają wnętrza urządzeń EMS AIRFLOW®.

► Czy możesz sobie wyobrazić szkodę, jaką te piaski mogą wyrządzić zębom Twoich pacjentów? EMS zdecydowanie zaleca, aby przeprowadzać zabiegi na pacjentach wyłącznie oryginalnymi piaskami marki EMS.

► EMS zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem niezatwierdzonych piasków od nieznanymi producentów, a nawet fałszerzy. Strzeż się! Piaski takie nie spełniają naszych surowych kryteriów jakości. To Twoi pacjenci będą musieli zapłacić cenę za te „oszczędne” rozwiązania.

► Przeprowadzaj zabiegi na swoich pacjentach stosując wyłącznie kliniczny protokół GBT! Dzięki GBT pozyskasz pacjentów na wizyty recall. Stosując skopiowane metody lub materiały, stracisz ich.



Zobacz jak oryginalna dysza AIRFLOW® została zniszczona już w 2 minuty, używając fałszywego piasku. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać w jamie ustnej Twoich pacjentów?



NAJLEPSZY PROTOKÓŁ

► GUIDED BIOFILM THERAPY TO SYSTEMATYCZNE, PRZEWIDYWALNE ROZWIĄZANIE PROFILAKTYKI, PRZY UŻYCIU NAJNOWOCZĘSNIJSZYCH TECHNOLOGII AIRFLOW®

08 PLAN WIZYT

ZDROWY PACJENT = SZCZĘŚLIWY PACJENT

- Zaplanuj harmonogram wizyt w zależności od potrzeby klinicznej
- Zapytaj pacjenta o jego wrażenia po zabiegu

07 KONTROLA

PODARUJ UŚMIECH SWOJEMU PACJENTOWI

- Upewnij się, że biofilm i kamień zostały usunięte
- Dokładnie zdiagnozuj próchnicę
 - Zabezpiecz fluorem
 - Koniec z polerowaniem

06 PIEZON® PS

USUŃ POZOSTAŁY KAMIEŃ

- Użyj minimalnie inwazyjnej końcówki EMS PIEZON® PS nad- i poddziąsłowo do 10 mm
- Wyczyść kieszonki >10 mm za pomocą kirety mini
- Użyj końcówki EMS PIEZON® PI wokół implantów i uzupełnień protetycznych do 3 mm poddziąsłowo

05 PERIOFLOW®

USUŃ BIOFILM Z KIESZONEK OD 4 DO 9 MM

- Użyj piasku AIRFLOW® PLUS w głębokich kieszonkach przy naturalnych zębach, furkacjach korzeni i implantach
- Zastosuj nową i smuklejszą końcówkę PERIOFLOW® Nozzle

► Technologia PIEZON® jest fundamentem protokołu GBT. Klinicyści, którzy początkowo byli przyzwyczajeni do wydajnością i komfortem. Minimalnie inwazyjny zabieg zapewnia najwyższy poziom komfortu, bezpieczeństwa

KLINICZNY!



DO ZARZĄDZANIA BIOFILMEM JAMY USTNEJ, PODCZAS PROFESJONANEJ
PERIOFLOW® I PIEZON®. POTWIERDZAJĄ TO DOWODY NAUKOWE.

01 OCENA I KONTROLA INFEKCJI

OCEŃ KAŻDY PRZYPADEK KLINICZNY
I ZASTOSUJ ŚRODKI OCHRONY

- ▶ Rozpocznij od przepłukania jamy ustnej pacjenta płynem BacterX® Pro
- ▶ Dokonaj oceny zębów, dziąseł i tkanek przyzębia ▶ Dokonaj oceny implantów i otaczających ich tkanek

02 WYBARWIANIE

UWIDOCZNIJ BIOFILM

- ▶ Używając gąbeczek wybarwiających EMS Biofilm Discloser, wskaż pacjentowi obszary, których nie doczyszczasz
- ▶ Kolor ułatwi usuwanie biofilmu
- ▶ Po usunięciu biofilmu, kamień jest łatwiejszy do wykrycia

03 MOTYWACJA

ZWIĘKSZ ŚWIADOMOŚĆ I EDUKUJ

- ▶ Podkreśl rolę profilaktyki
- ▶ Przeprowadź instruktaż higieny jamy ustnej
 - ▶ EMS zaleca stosowanie szczoteczek elektrycznych, międzyzębowych oraz irygatorów

04 AIRFLOW® MAX

USUŃ BIOFILM, OSADY I WSTĘPNIE
ZMINERALIZOWANY KAMIEŃ

- ▶ Użyj AIRFLOW® MAX na naturalnych zębach, wypełnieniach i implantach
- ▶ Usuń biofilm nad- i poddziąsłowo do 4 mm, używając piasku AIRFLOW PLUS® 14 µm
- ▶ Usuń biofilm również z dziąseł, języka i podniebienia
- ▶ Usuń pozostałe osady na szkliwie używając piasku AIRFLOW® CLASSIC Comfort

do używania wyłącznie narzędzi ręcznych i odkryli GBT z technologią EMS PIEZON®, są zdumieni wynikami, i skuteczności.

ZMIENIAMY REGUŁY GRY

„Właśnie miałam przeprowadzony rutynowy skaling przez moją higienistkę i nie mogę uwierzyć, jak inaczej się czułam. Podczas zabiegu mam zwykle dość wrażliwe moje dolne, przednie zęby, ale dzisiaj było prawie tak, jakby w ogóle higienistka ich nie dotykała. Nic nie czułam!”

HARRIS CHARLOTTE
PACJENTKA

„Dzięki urządzeniom EMS możemy motywować naszych pacjentów w zakresie profilaktyki. Poprzez przyjemne uczucie w ustach – czynnik WELLNESS. Usuwanie osadów – czynnik BEAUTY. 100% usuwanie płytki nazębnej – czynnik ZDROWOTNY.”

MICHAELA GRUL
STOMATOLOG

WSZYSCY UWIELBIAMY GBT!



„Urządzenia firmy EMS bardzo pomogły nam uprościć protokół zabiegowy naszych „sesji profilaktycznych”, aby był łagodniejszy dla tkanek i bardziej przyjazny dla pacjenta (mniejszy ból). Po ponad 3 latach profilaktyka stała się technicznie i ekonomicznie bardzo ważną częścią naszej praktyki stomatologicznej, również dzięki kompetencjom naukowym i technicznym (np. NO PAIN z końcówką PS, piasek PLUS) EMS.”

DR. NADINE STRAFELA-BASTENDORF
STOMATOLOG

„PIEZON® PS to naprawdę najbardziej kompletna końcówka do usuwania twardego kamienia nazębnego. Jej smukła konstrukcja pozwala na uniwersalne zastosowanie nad- i poddłużsłowo, w najmniej inwazyjny sposób i przy najwyższym komforcie dla pacjenta.”

CELSDA COSTA
SZEFSDA & HIGIENISTA
STOMATOLOGICZNY, SZWAJCARIA

„Nacisk wymagany do usunięcia złogów jest bardzo niewielki, co sprawiło, że skaling było mniej uciążliwy, co skutkuje mniejszym zmęczeniem operatora.”

FAYE DONALD
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, WIELKA BRYTANIA

“I FEEL GOOD”

„Jestem tak zadowolona z GBT, że nie mogłabym już zaakceptować innej metody czyszczenia zębów. Dzięki GBT regularnie i chętnie odwiedzam mojego dentystę na zabiegi profilaktyczne. I za każdym razem, gdy wychodzę z gabinetu, cieszę się z mojego czystego i olśniewającego białego uśmiechu! Dla mnie profilaktyka z GBT stała się wspaniałym przeżyciem i gorąco polecam!”

SABINE PAVICIC, PACJENTKA

„Naprawdę podobało mi się GBT. Pierwszy raz bez bólu podczas ultradźwięków. Z radością będę przychodziła co 3 miesiące, jeśli zastosowany będzie taki sam protokół zabiegowy”

KATARZYNA S.
PACJENTKA

**PRZECZYTAJ
WIĘCEJ OPINII**



TWOI PACJENCI PROSZĄ
O ZABIEG **WELLNESS**,
NIE O BOLESNY ZABIEG



GBT

E.M.S.
EMS Poland Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188H
40-203 Katowice, Polska
+48 32 493 70 60
EMS-POLAND.COM

EMS 
MAKE ME SMILE.